


トップヘッド 911N 取扱説明書

ご使用にあたっての注意事項

- 本製品は装着者の安全を保障するものではありません。使用者の障害レベル、体格、使用環境などを十分考慮し、安全上問題がないことを第三者が評価した上でご使用下さい。
- 使用の可否の判断がつかない場合は、医師または理学療法士に相談して下さい。
- 本製品の使用によりかぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師に相談して下さい。
- 使用期間及び使用状況により製品に不具合、破損が生じた場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 装着前に必ず本体、ベルトなどに異常がないか確認して下さい。
- 本製品の加工、改造は絶対に行わないで下さい。やむを得ず改造する場合は、購入先に依頼し、安全性を十分に考慮した改造を行って下さい。
- 寒さにより、内部の低反発素材が硬くなります。
- 変形の恐れがありますので直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しないで下さい。
- 外力などにより変形の可能性があります。保管する際はご注意下さい。
- 常に乾燥させてご使用下さい。
- ご本人以外のご使用はお止め下さい。

装着方法

- 装着前に本製品の前後を確認して下さい。
 - 本製品を頭にかぶり、あごベルトを耳ベルトに通し、とめます。
- 注) あごベルトのマジックが耳ベルトにあたると生地が傷みますのでご注意下さい。

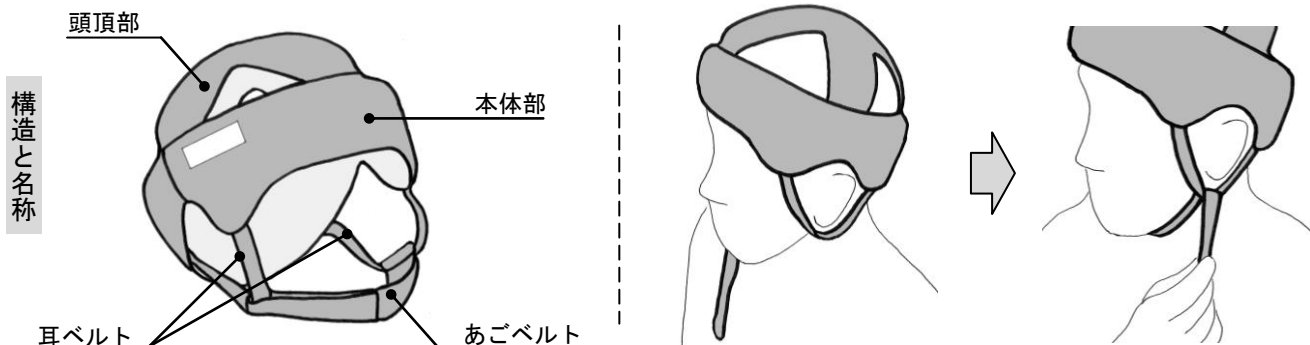


洗濯について

- 本製品は洗濯機で丸洗いです。その際は、洗濯ネットをご使用下さい。
- 洗剤は一般的な合成洗剤を使用して下さい。
- 脱水機の使用は可能ですが、できるだけ陰干しをして下さい。
- 漂白剤はできるだけ使用しないで下さい。
- ドライクリーニングは可能です。

取扱店様用

調整方法

- 片方カシメ留めのあごベルトを取り付ける際は、ほつれ防止のため先端を内側に折り込んで下さい。(右図)
- 穴は千枚通しなど先の細いもので開け、カシメを留めて下さい。
- 使用者がベルトの接触感を嫌がる場合、肌が弱い場合は、ベルトや必要箇所へ適切な処置を施して下さい。

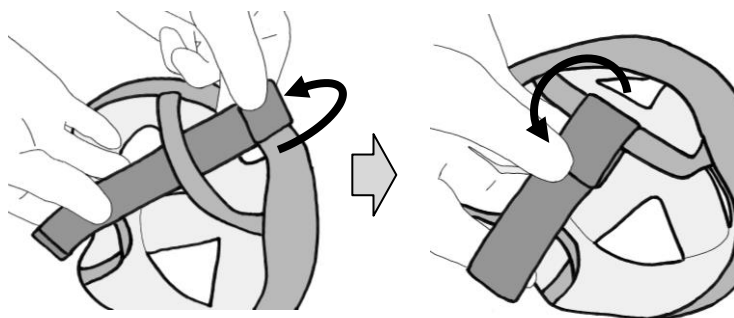

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱店

製造・発売元 世界遺産 石見銀山
中村ブレイス株式会社
本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL(0854)89-0231(代) FAX(0854)89-0018
東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-10-3
世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号
TEL(03)3709-9361 FAX(03)3709-9362

2013.11